




Entomed
MedTech AB

KERN MPE Person golvvåg

Professionell person golv våg med BMI-funktion - godkänd som medicinteknisk produkt



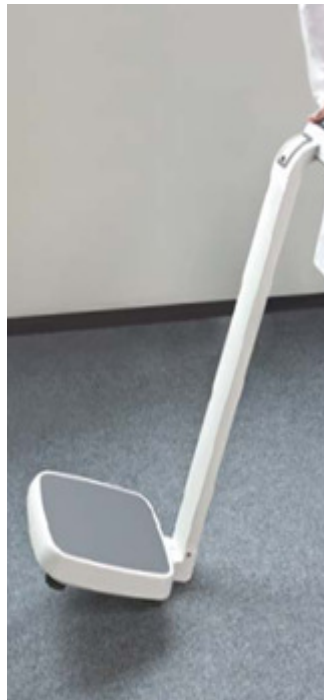

Funktion

- Verifierad enligt klass III
- Godkänd som en medicinsk produkt enligt 93/42/EEC
- 2 st displayer, varav 1 st bakåtvänt för att lättare läsas av från andra hållet
- Gäller endast för MPE-HM: integrerad längdmätare i pelare, med mätområde mellan 88-200 cm
- Robust konstruktion för dagligt bruk i en professionell miljö
- Ergonomiskt optimerad design
- Enkel och hygienisk rengöring
- Säker och halkfri positionering med justerbara gummifötter. Nivåindikator för att få en korrekt placering av våg
- Stor plattform med halkfri och slitstark yta för säker mätning
- Vibrationsfri mätning: Vibrationer filtreras bort så att en stabil vikt erhålles, idealisk för oroliga patienter
- Data Hold-funktion: När mätvärdet förblir oförändrad, "fryser" automatiskt värdet i displayen i 10 sek. Detta ger tillräcklig med tid för att läsa av vikten i lung och ro
- Mor och barn funktion: Moderns vikt mäts och sedan återställs vågen till noll med hjälp av en knapptryckning. Efter detta kan modern och barnet vägas tillsammans. Vikten av barnet kommer nu att visas på displayen. Detta är särskilt bra för spädbarn, eftersom detta gör det möjligt att väga spädbarnet säkert, i armarna på sin mor.

Teknisk specifikation

- Bakgrundsbelyst LCD-display, sifferhöjd 25 mm
- Mått: vågplattan BxDxH 365x360x80 mm
- Dimensioner MPE-HM: BxDxH 365x620x2125 mm (med integrerad längdmätare), MPE-PM: BxDxH 365x450x1020 mm
- Nätadapter (extern) ingår
- Data gränssnitt RS 232 standard
- Vågens nettovikt ca. 12 kg
- Max belastning 250 Kg